

# HA标签磁珠法IP/Co-IP试剂盒(植物)

## HA-tag Magnetic IP/Co-IP Kit for Plant

注:本产品干冰运输;试剂按说明书保存于4°C及-20°C,保质期12个月。

序号	试剂	货号及规格			储存
		IPP012 (6T)	IPP012M (12T)	IPP012L (40T)	
01	Anti-HA Magnetic Beads	0.125 mL	0.25mL	0.83 mL	4°C
02	Lysis Buffer	3.5 mL	7 mL	24mL	4°C
03	Wash Buffer	12.5 mL	25 mL	84mL	4°C
04	Elution Buffer	0.325 mL	0.65mL	2.17 mL	-20°C
05	Protease Inhibitor	95μL	0.19mL	0.63 mL	-20°C
06	Neutralization Buffer	32.5 μL	65 μL	0.22mL	4°C

### 注意:


1. 需自备 PBS、磁力架等试剂耗材。
2. 该试剂盒包含足够完成 6、12 或 40 个反应的试剂, 每个反应使用 20 μL 磁珠。由于每次 IP 实验至少需要设置一个实验组和一个阴性对照组, 因此一次实验至少需要使用 2 个反应的试剂量。

### 产品简介/Product Description

本试剂盒采用 Anti-HA 磁珠来完成 HA 标签融合蛋白的免疫共沉淀实验。实验前先将 HA 标签与目标蛋白在细胞或组织中融合表达。裂解样本后, 将 Anti-HA 磁珠加入样本中, 磁珠上偶联的 HA 纳米抗体与 HA 标签融合蛋白及其结合蛋白形成复合体, 去除未结合的蛋白后, 可以采用多种方法洗脱蛋白质。

# 技术路线/Technology mapping

## 1. 原理流程图

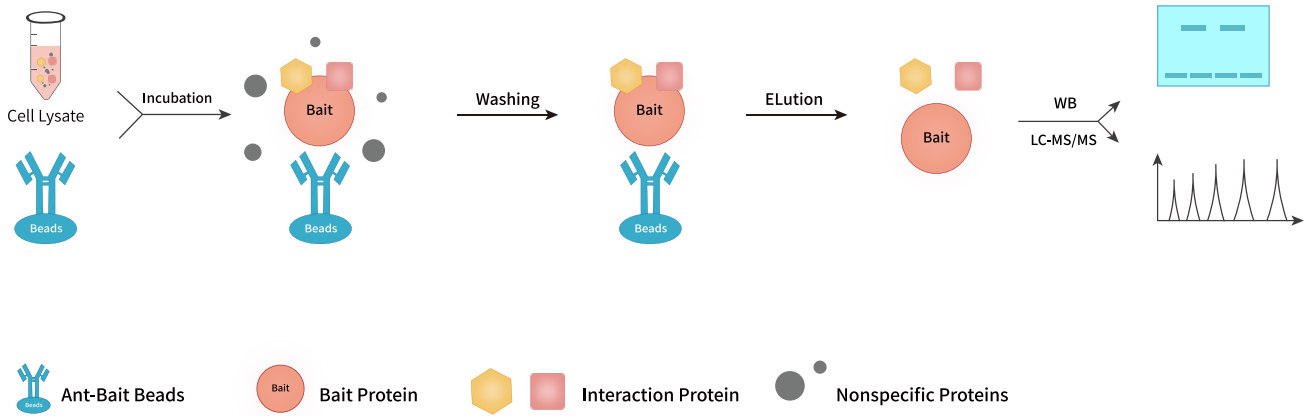

## 使用流程/Procedure

### 1. 总蛋白提取

- ①实验组和对照组分别取 0.2~0.3 g 植物组织，用无菌双蒸水清洗干净，用液氮在研钵中充分研磨，再转移粉末至预冷的新离心管中；
- ②样本置于冰上，每组加入 500  $\mu\text{L}$  预冷的②裂解缓冲液、5  $\mu\text{L}$  ⑤蛋白酶抑制剂（按 1% 添加），吹打混匀；
- ③冰上超声破碎至溶液基本澄清；
- ④4 $^{\circ}\text{C}$  12000 g 离心 15 min，收集上清至新的离心管中；
- ⑤取 30  $\mu\text{L}$  作为 input，剩余用于 Co-IP 实验，置于冰上备用或 -80 $^{\circ}\text{C}$  保存。

#### 注意：

1. 当样本不能完全裂解时（溶液很浑浊），可以增加裂解缓冲液或改善超声条件继续裂解。超声条件因样本类型和超声设备而异，应提前摸索好。样本蛋白浓度通常不低于 5  $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ ，总量约 2~3 mg。
2. 如果样本中目标蛋白丰度较低，或结合物间的结合较弱，可以增加初始样本量，同时等比例增加裂解缓冲液和酶抑制剂的用量，但总孵育体积最大不超过离心管体积的 2/3，体积过大可以更换大规格离心管。

### 2. 漂洗液准备

- ①为了防止实验过程中的蛋白降解，需要向漂洗液中添加蛋白酶抑制剂。取出 10 mL 离心管，加入实验组和对照
- ②组总共所需的 3.8 mL a. 漂洗液、19  $\mu\text{L}$  b. 蛋白酶抑制剂（按照 0.5% 添加），混合均匀，冰上保存，现配现用。
- ③如果有多组样本，请按照实际使用量配置。

### 3. 免疫共沉淀

- ①将① Anti-HA 磁珠上下颠倒混匀，每组取 20  $\mu\text{L}$  磁珠到新的离心管中；
- ②每组加入 200  $\mu\text{L}$  漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清；
- ③重复上步操作一次；
- ④向磁珠中加入相应组别的样本裂解液（步骤 1 制备），放混匀仪上室温孵育 1~2 h 或 4 $^{\circ}\text{C}$  过夜；
- ⑤放磁力架上静置 1 min 并弃上清；
- ⑥每组加入 500  $\mu\text{L}$  漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清；
- ⑦重复上步操作两次，共漂洗三次，保留磁珠。

#### 4. 蛋白洗脱

本说明书提供以下两种蛋白洗脱方案，操作者可以根据后期检测的需要选择合适的洗脱方法。

1) SDS-PAGE 上样缓冲液洗脱法（变性洗脱法）：向磁珠中加入 50  $\mu\text{L}$  1 $\times$ SDS-PAGE 上样缓冲液，95  $^{\circ}\text{C}$ 加热 5 min；磁力架上静置 1 min，收集上清至新的离心管中，-20 $^{\circ}\text{C}$ 保存。该洗脱产物适用于 SDS-PAGE 或 Western Blot 检测；如果需要进行质谱检测，则切胶条后送检。

2) 非变性洗脱法：向磁珠中加入 50  $\mu\text{L}$  ④洗脱缓冲液，涡旋震荡 20 s，放混匀仪上室温洗脱 10~15 min；涡旋震荡 20 s, 1000 g 离心 20 s, 放磁力架上静置 1 min, 收集上清至新的离心管中；加入 5  $\mu\text{L}$  ⑥中和液，-80 $^{\circ}\text{C}$ 保存。该洗脱产物保持原有生物活性，适用于各种检测，例如质谱、SDS-PAGE 或 Western-blot 等。

#### 注意：

1. 本试剂盒提供的洗脱缓冲液可以兼容质谱。

2. Anti-HA 磁珠没有抗体轻重链污染问题，建议首选变性洗脱法，洗脱效率更高。如果选择非变性洗脱法，可以暂时保留洗脱后的磁珠，如果洗脱效率低，则采用变性洗脱法继续洗脱蛋白。

3. Co-IP 捕获的蛋白量通常较少，因此 SDS-PAGE 建议用硝酸银染色，染色步骤参考如下：

（为了便于称量，每步配置的溶液体积较大，实际操作时取适量溶液浸泡胶即可）

(1) 固定：30 min（乙醇：乙酸：水=4：1：5 体积比）；

(2) 敏化：30 min（乙酸钠 10.2 g，硫代硫酸钠 0.471 g，乙醇 45 mL，加水至 150 mL）；

(3) 水洗：4 次，每次 10 min；

(4) 银染：30 min（硝酸银 0.375 g，加水至 150 mL）；

(5) 水洗：2 次，每次 40 s；

(6) 显色：显影至条带清楚（碳酸钠 3.75 g，60  $\mu\text{L}$  甲醛，加水至 150 mL）；

(7) 终止：5 min（Na<sub>2</sub>EDTA 2.19 g，加水至 150 mL）。

#### 注意事项/Notes

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内；

2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

